




SAM[®] IO Stabilizer | Instructions for Use


APPLICATION STEPS:

1

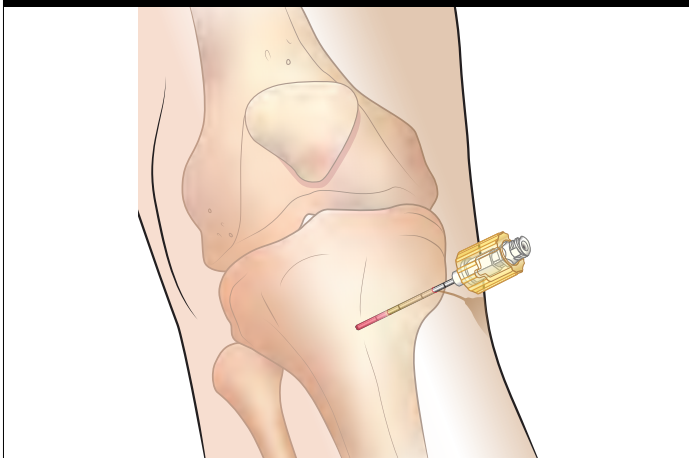


With catheter in position, consider use of Stabilizer.

2

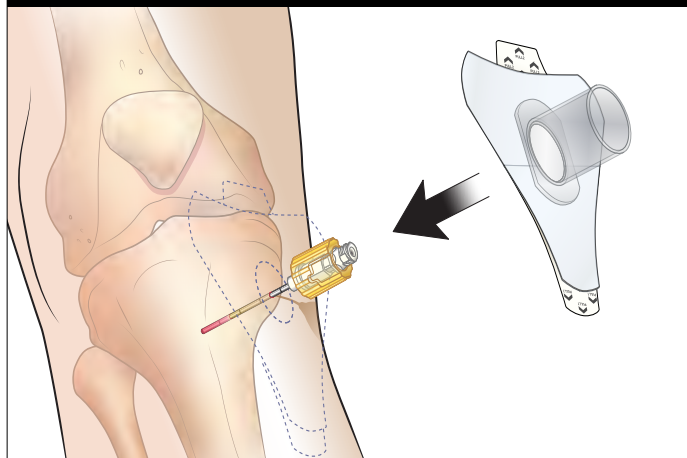


Place sterile Stabilizer carefully over catheter and against skin.

3

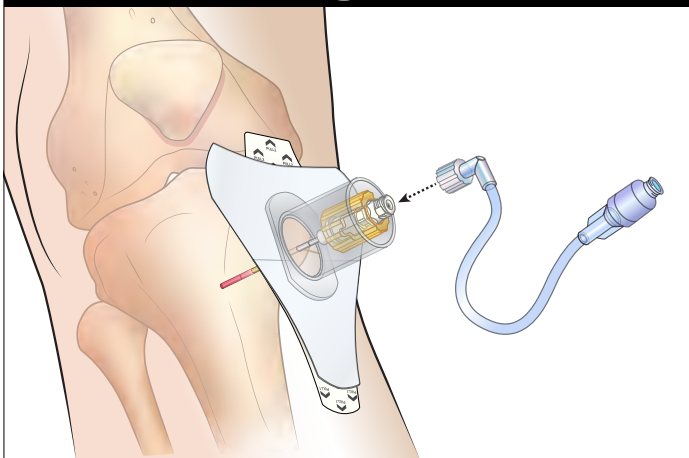


Attach primed extension set to catheter.
KEY POINT: Extension set design permits single-handed tightening to catheter.


3a (optional)

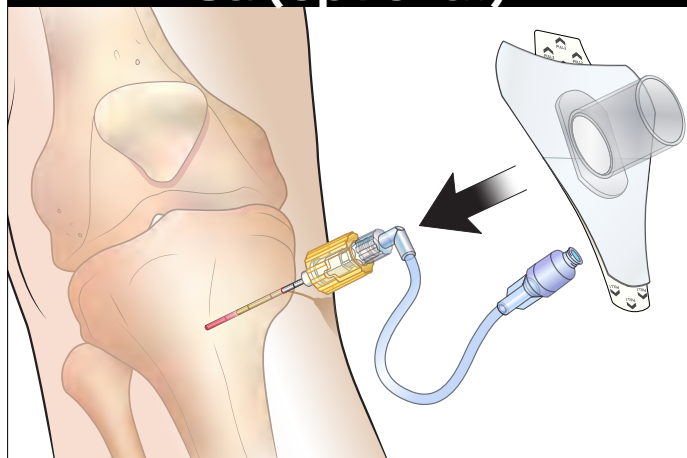


Optional Stabilizer Application Method:
With attached extension set in position gently feed extension set through Stabilizer cylinder. Guide Stabilizer over catheter, and against patient skin.

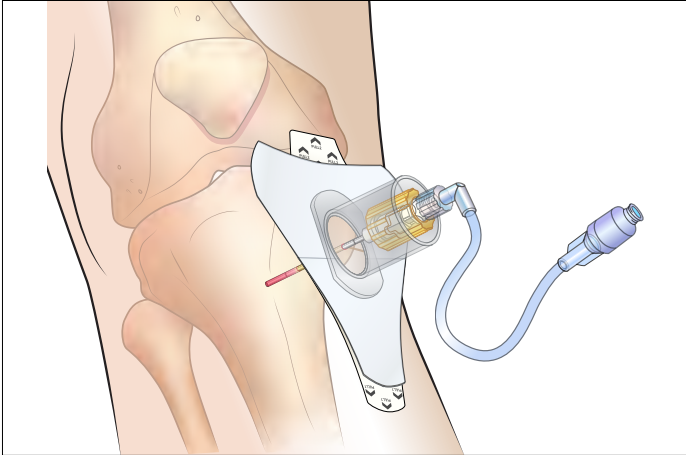4


Ensure catheter is centered within Stabilizer.

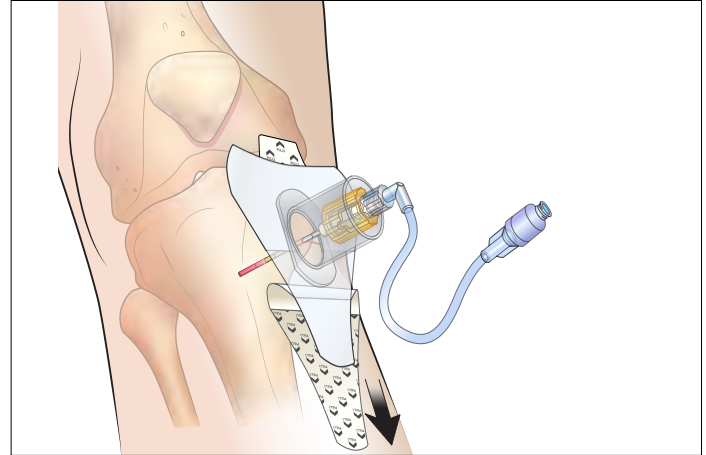5

Hold Stabilizer in position and gently pull Tab 1. By pulling Tab 1 you are removing adhesive backing. This will expose adhesive to patient skin. Gently press exposed adhesive against patient skin.

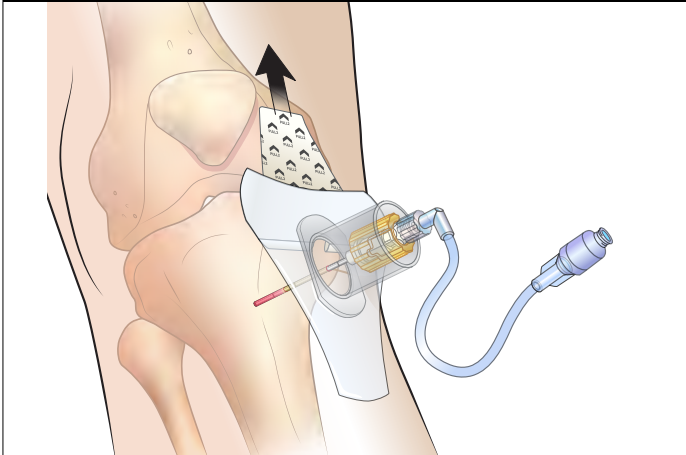



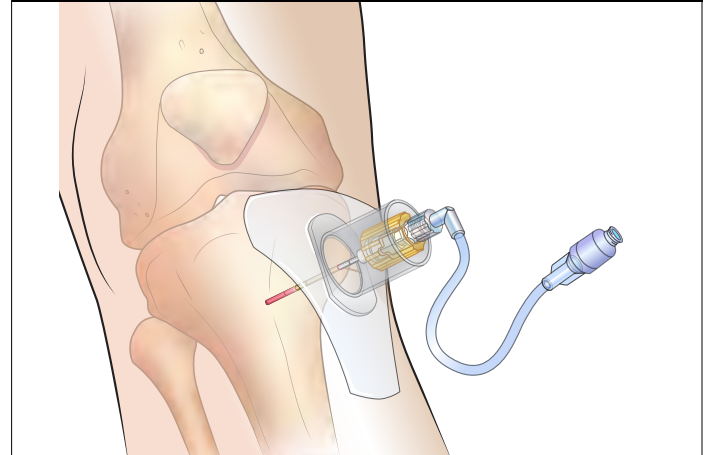




6


Hold Stabilizer in position and gently pull Tab 2. By pulling Tab 2 you are removing adhesive backing. This will expose adhesive to patient skin. Gently press exposed adhesive against patient skin.


7

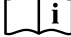With Stabilizer in position (and adhesive backing removed) gently smooth all exposed adhesive to patient skin.

SYMBOL GLOSSARY:

Indicates a medical device that should not be used if the package has been damaged or opened.	
Indicates a medical device that is intended for one use, or for use on a single patient during a single procedure.	
Indicates a medical device that has been sterilized using ethylene oxide.	
For prescription use only.	
Indicates the need for the user to consult the instructions for use.	
Not for Sternal use.	
Indicates a medical device that needs protection from light sources.	
Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.	
Indicates a medical device that is not to be resterilized.	

 IO740-1P-EN - 1 Pack

 IO740-5P-EN - 5 Pack

SAM04041 A



GET TRAINED:
sammedical.com



SAM Medical Products®
12200 SW Tualatin Rd, Ste 200
Tualatin, OR 97062 US

Customer Service & Product Support:

Toll Free: 800.818.4726 (USA)

Tel: 503.639.5474 (USA)

Fax: 503.639.5425 (USA)

technical.support@sammedical.com

SAM[®]
MEDICAL


IO-Stabilizer-IFU-1



Stabilisateur **SAM**[®] IO | Mode d'emploi


ÉTAPES D'APPLICATION :

1

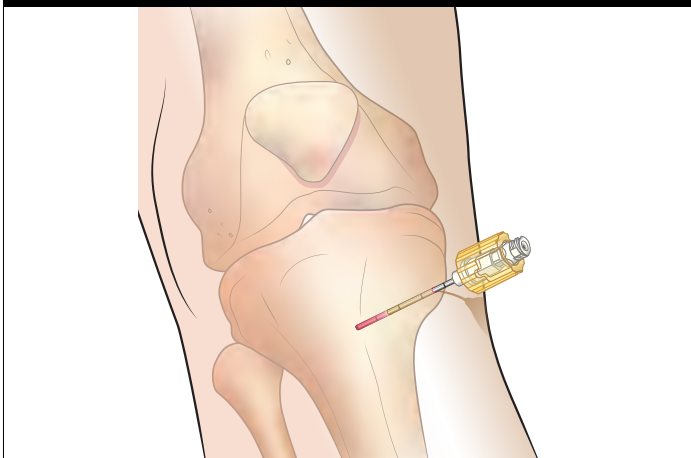


Une fois le cathéter en place, envisager d'utiliser le stabilisateur.

2

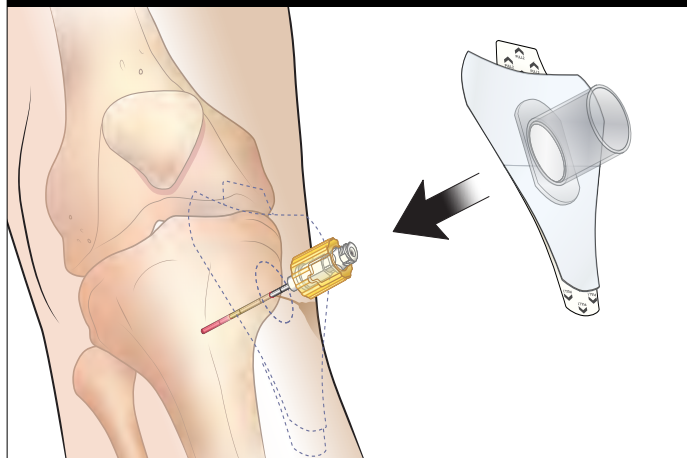


Placer le stabilisateur stérile avec précaution sur le cathéter, contre la peau.

3

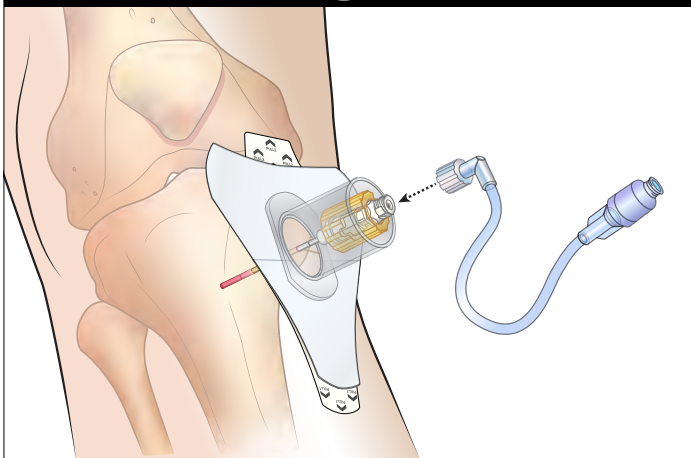


Fixer le prolongateur amorcé au cathéter.
IMPORTANT : Le prolongateur se raccorde au cathéter d'une seule main.


3a (facultatif)

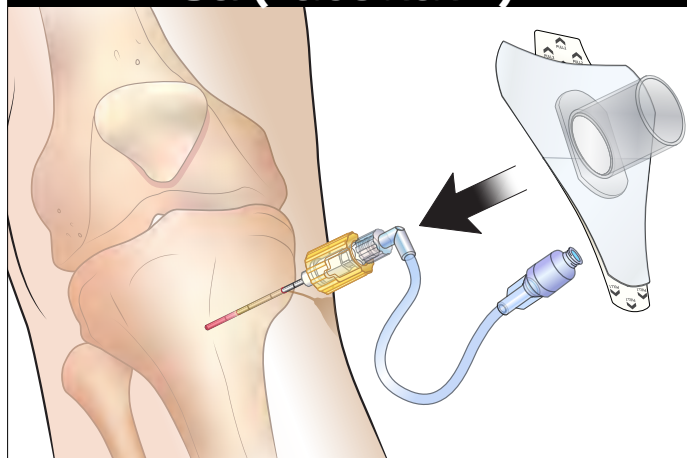


Méthode d'application facultative du stabilisateur :
Une fois le prolongateur en place, l'enfiler délicatement dans le cylindre du stabilisateur. Guider le stabilisateur sur le cathéter, puis contre la peau du patient.

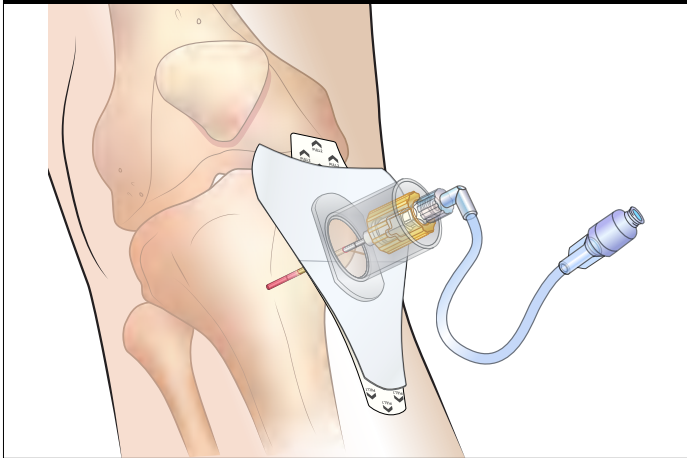4


S'assurer que le cathéter est centré à l'intérieur du stabilisateur.

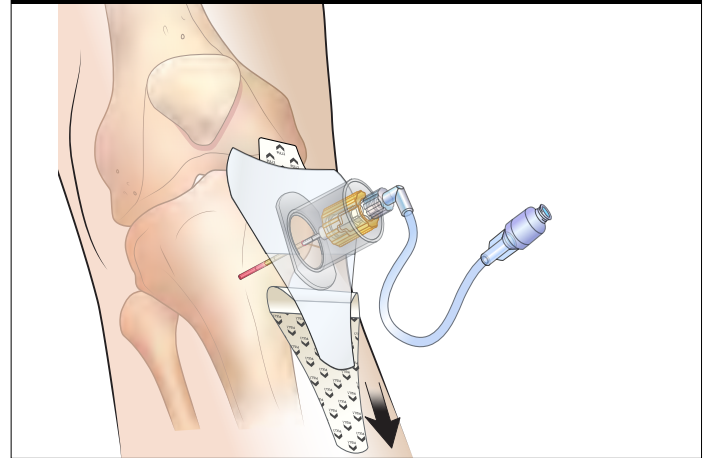5

Tenir le stabilisateur en place et tirer avec précaution sur la languette 1. Tirer sur la languette 1 permet de détacher le support adhésif. La face adhésive sera ainsi en contact avec la peau du patient. Appuyer délicatement sur l'adhésif pour le faire adhérer à la peau du patient.

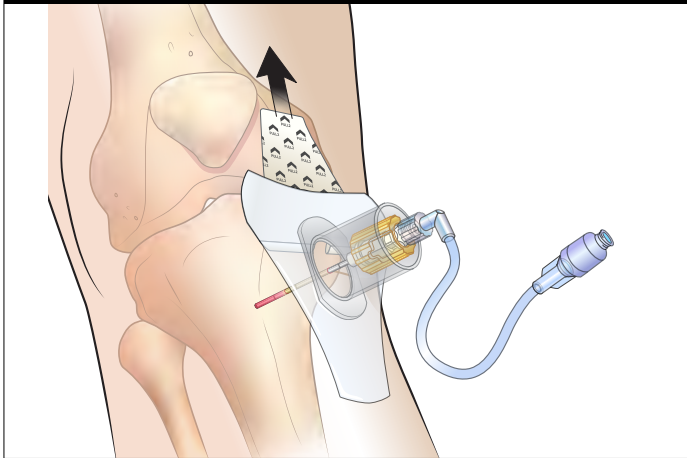6


Tenir le stabilisateur en place et tirer avec précaution sur la languette 2. Tirer sur la languette 2 permet de détacher le support adhésif. La face adhésive sera ainsi en contact avec la peau du patient. Appuyer délicatement sur l'adhésif pour le faire adhérer à la peau du patient.

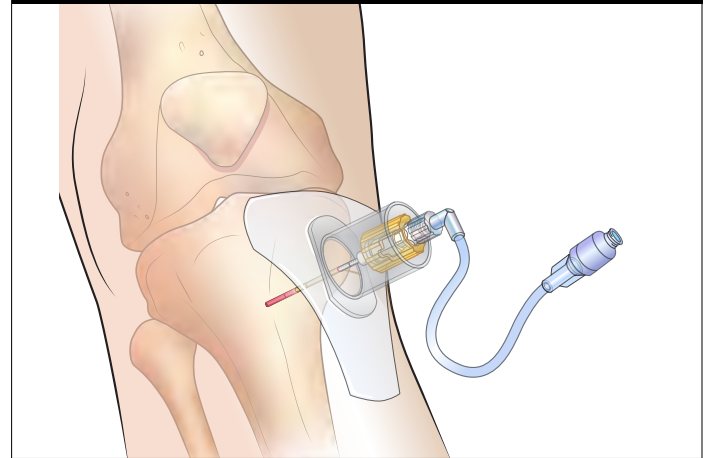7

Une fois le stabilisateur en place (et le support adhésif retiré), lisser avec précaution toutes les surfaces adhésives exposées sur la peau du patient.

GLOSSAIRE DES SYMBOLES :

Indique un dispositif médical qui ne doit pas être utilisé si son emballage est endommagé ou ouvert.	
Indique un dispositif médical destiné à un usage unique, ou à un seul patient au cours d'une intervention unique.	
Indique un dispositif médical qui a été stérilisé à l'oxyde d'éthylène.	
Sur ordonnance seulement.	
Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi.	
Non destiné aux perfusions sternaes.	
Indique un dispositif médical qui doit être protégé contre les sources lumineuses.	
Indique un dispositif médical qui doit être protégé contre l'humidité.	
Indique un dispositif médical qui ne doit pas être restérilisé.	

 IO740-IP-EN – 1 paquet

 IO740-5P-EN – 5 paquets

SAM04041 A



FORMATION :
sammedical.com



SAM Medical Products®
12200 SW Tualatin Rd, Ste 200
Tualatin, OR 97062 États-Unis

Service après-vente et soutien technique :

Numéro sans frais : 800 818-4726 (États-Unis)

Téléphone : +1 503 639-5474 (États-Unis)










Télécopieur : +1 503 639-5425 (États-Unis)


technical.support@sammedical.com


SAM[®]
MEDICAL

sammedical.com

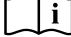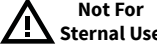SYMBOL GLOSSARY:

Indicates a medical device that should not be used if the package has been damaged or opened.	
Indicates a medical device that is intended for one use, or for use on a single patient during a single procedure.	
Indicates a medical device that has been sterilized using ethylene oxide.	
For prescription use only.	
Indicates the need for the user to consult the instructions for use.	
Not for Sternal use.	
Indicates a medical device that needs protection from light sources.	
Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.	
Indicates a medical device that is not to be resterilized.	

 IO740-1P-EN - 1 Pack

 IO740-5P-EN - 5 Pack

SAM04041 A



GET TRAINED:
sammedical.com



SAM Medical Products®
12200 SW Tualatin Rd, Ste 200
Tualatin, OR 97062 US

Customer Service & Product Support:

Toll Free: 800.818.4726 (USA)

Tel: 503.639.5474 (USA)

Fax: 503.639.5425 (USA)

technical.support@sammedical.com

SAM[®]
MEDICAL

IO-Stabilizer-IFU-1